

Performance Irrigation* SPÜLSYSTEME



pohlmedical
professional instrumentals

An der Gracht 14 Tel. 0 2373-391093
58706 Menden Fax: 0 2373-915633

www.pohlmedical.de

Simpulse* SOLO

GEPULSTES SPÜLSYSTEM

LEISTUNG

Optimale Leistung und Kontrolle

- Leistungsregulierung über den Handgriff
- Spülfunktionen für viele chirurgische und klinische Anwendungen
- Quetschklemme am Handgriff zur Regulierung der Absaugung

Ergonomisch geformter Handgriff

- Pistolenhandgriff zur Vermeidung von Handermüdung
- Arretierbarer Schalter für konstante Spülung auf höchster Stufe

Große Auswahl an Aufsätzen

- Einzigartige Aufsatzkonfigurationen zur optimalen Reinigung
- Separater Absaugschlauch zur Reduzierung der Verstopfungsgefahr
- Aufsätze mit zurückziehbarem Spritzschutz zur einfacheren Spülung

EINFACHHEIT

Einfache Inbetriebnahme und Verwendung

- Keine externe Stromquelle erforderlich
- Sofort einsatzbereit
- Auch als Set erhältlich

Einfache Entsorgung

- System für den Einmalgebrauch
- Batteriefach lässt sich nach dem Gebrauch leicht aus dem Handgriff entfernen

BEWÄHRTE LEISTUNG

- In einer vorangegangenen Studie¹ zeigte das Simpulse* SOLO-System unter allen getesteten Systemen den höchsten Spitzendruck.
- Die Pulsfrequenz und die Flussrate des Simpulse* SOLO Systems waren in dieser limitierten Studie höher als bei allen anderen getesteten Systemen.


Gerät	Durchschnittlicher Druck (g)				Frequenz Pulse/s	Flussrate ml/Min.
	2,5 cm Abstand		10 cm Abstand			
	Obere Spitze	Untere Spitze	Obere Spitze	Untere Spitze		
Davol* Simpulse* Solo	192	0	207	0	34	1290
Stryker* Surgilav* Plus	123	0	108	0	14	900
Stryker* InterPulse* ²	84	0	32	0	18	670
Zimmer* Pulsavac*	48	33	43	33	26	910
Zimmer* Var-A-Pulse*	92	0	102	0	14	500

¹ "Pulsatile Lavage Irrigators: Comparative Evaluation of Impulse Pressures", CITECH, ©1998
² Daten liegen vor, Davol Inc.

EIN GEPULSTES SPÜLSYSTEM, DAS TECHNISCH EINFACH


Ungehindertes Sauglumen
für optimale Absaugleistung bei
minimierter Verstopfungsgefahr

KRAFT

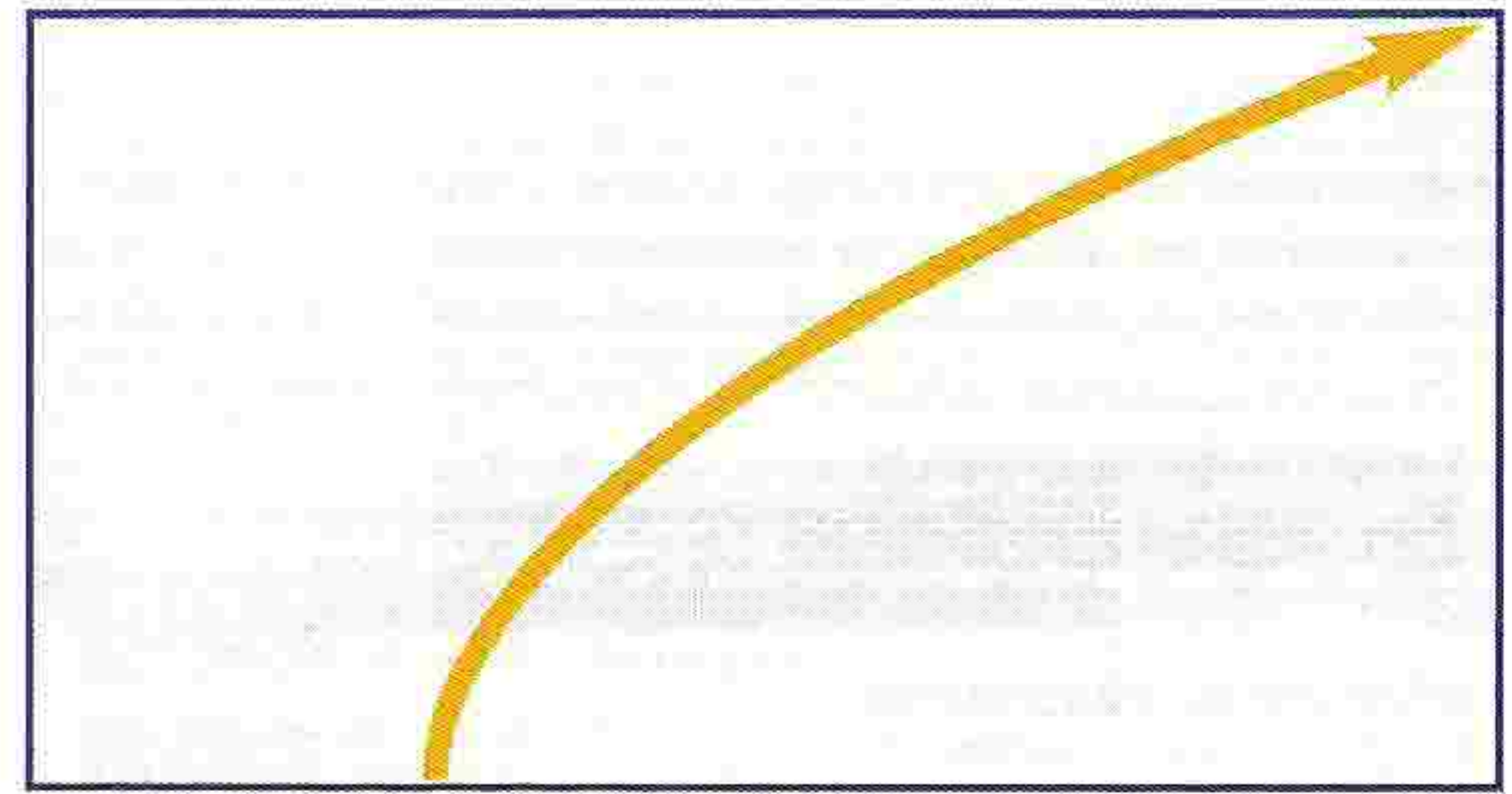

SCHALTERDRUCK

OPTIMALES KRAFT/DRUCK-VERHÄLTNIS
FÜR MAXIMALE KONTROLLE

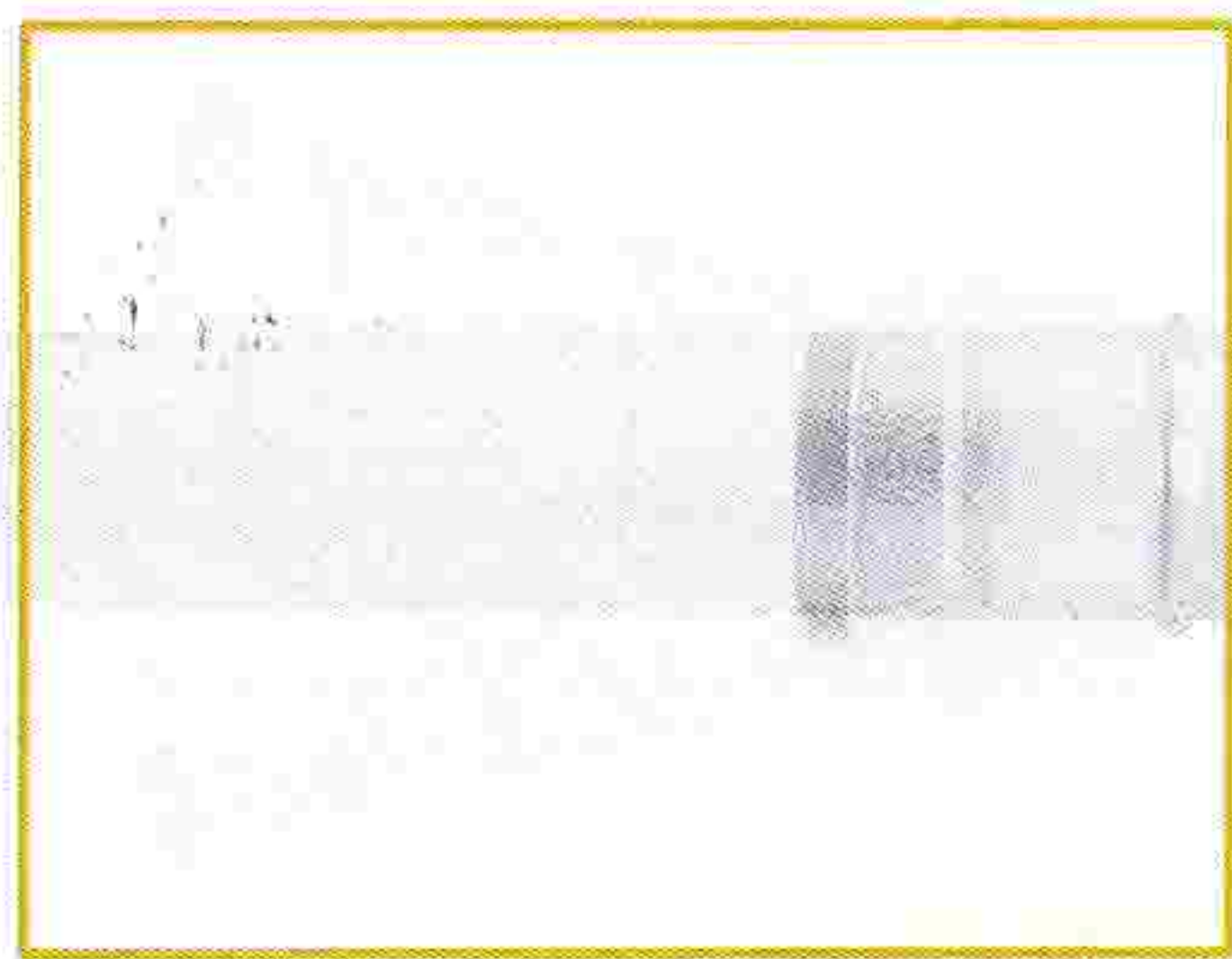

Einzigartige, abnehmbare
Spül-/Absaugaufsätze für
maximale Flexibilität

Praktische Schalterarretierung
für konstante Spülung auf
höchster Stufe

Schalter zur Regulierung des
Spül-/Absaugdrucks

Herausnehmbares Batteriefach zur
einfachen und ordnungsgemäßen
Entsorgung

H AUSGEREIFTER IST

BAIRD

